

小型採血管準備システム BC・ROBO-mini 40



写真はオプション装備モデル
(トレイチェンジャー・手貼りプリンタ)

採血管準備システムのニューフェイス
BC・ROBO-mini

TMC Techno Medica

小型採血管準備システム BC・ROBO-mini 40

◎コンパクト

■設置場所を選ばない
超小型デスクトップタイプ。
(設置面積:445mm×430mm)

◎ローコスト


■ラベルプリンタの
価格に近づく低価格を実現。

◎ネットワーク

■上位のコンピュータから
ラベルプリンタを
接続する感覚で簡単に制御可能。

◎スピーディー

■大型採血管準備システムに匹敵する
5秒/本の高速処理能力。

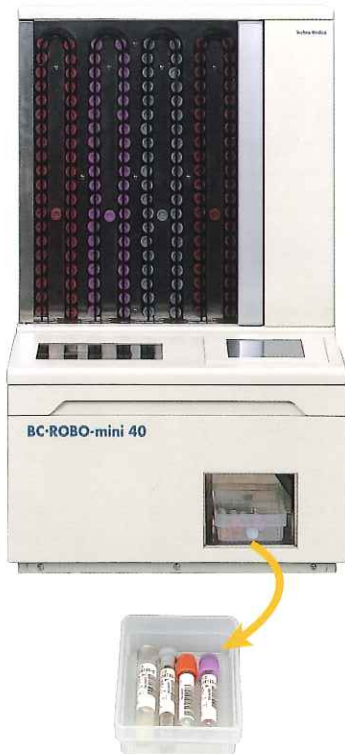

●採血管セットは安心・簡単な
フロント操作方式を採用。



1管種40本、4管種まで対応可能。フロント操作方式を採用した採血管の補充は、動作中でも簡単・安全。収納部カバーを開けてキャップを手前に向け差し込むだけ。

●操作性に優れた大型ディスプレイ表示のタッチパネル方式。



オフライン発行(磁気カード診察券/2次元コード診察券)使用時の入力操作も簡単・確実。

■仕様

適用採血管	径 : φ12~φ16.5mm 長さ : 75~100mm ゴム栓、フィルム栓、プラスチック栓、スピッツ
採血管供給部	4管種対応 1管種40本収納
処理能力	5秒/本(連続発行時)
印字方式	ダイレクトサーマルのみ
印字の種類	バーコード : code128, code39, JAN, 2of5, NW-7 文字 : 英文字、数字、ひらがな、カタカナ、記号、漢字
ラベル	30×50、35×50、30×60mm 1500枚/巻
ラベル貼付け位置	手動にて任意に可変可能
データバッファ容量	8ラベル分データ取込み可能
インターフェース	RS232C
電気容量	100V、5A
外形寸法(mm)	445(W)×430(D)×755(H) / トレイチェンジャー 700(W)×210(D)×210(H)
重量	40 kg
オプション	磁気カードリーダー、2次元コードリーダー、手貼りプリンタ、LAN I/F

●外観、仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

●オプション

採血業務の効率化をサポートするトレイチェンジャーと手貼りプリンタの組み合わせも可能。(表紙Photo)



BC-458SR



安全に関するご注意

●ご使用前に必ず「取り扱い説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

●熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる場合があります。異常を感じた場合はすぐに操作を停止し、お買い上げの代理店、販売店、または弊社までご連絡ください。

本カタログは、2012年5月現在のものです。

TMC 株式会社テクノメディカ 本社 〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-5-1 TEL(045)948-1961 FAX(045)948-1962
URL <http://www.TechnoMedica.co.jp> E-mail info@TechnoMedica.co.jp

名古屋支店 〒464-0850 名古屋市中千種区今池4-4-9 5F TEL(052)741-1516 FAX(052)741-1517
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 11F TEL(06)6393-3800 FAX(06)6393-3801
福岡支店 〒812-0015 福岡市博多区山王1-11-35 4F TEL(092)483-7333 FAX(092)483-7334
札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西7-2-5 4F TEL(011)271-3770 FAX(011)271-3760
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-14-1 3F TEL(022)771-9333 FAX(022)771-9334

北関東営業所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町2-44 5F TEL(048)650-8191 FAX(048)650-8192
甲信越営業所 〒390-0872 松本市北深志3-9-6 2F TEL(0263)38-0016 FAX(0263)38-0017
広島営業所 〒731-0122 広島市安佐南区中筋2-3-4 1F TEL(082)830-5103 FAX(082)830-5104
松山営業所 〒790-0056 松山市土居町23-5 1F TEL(089)945-3870 FAX(089)945-3871