




赤血球沈降速度測定装置

Quick eye

クイック アイ


SESR-2001

検体IDバーコード管理なので、
検体をセットするだけの
シンプル・安全操作。
しかも、最速20分のスピード測定。

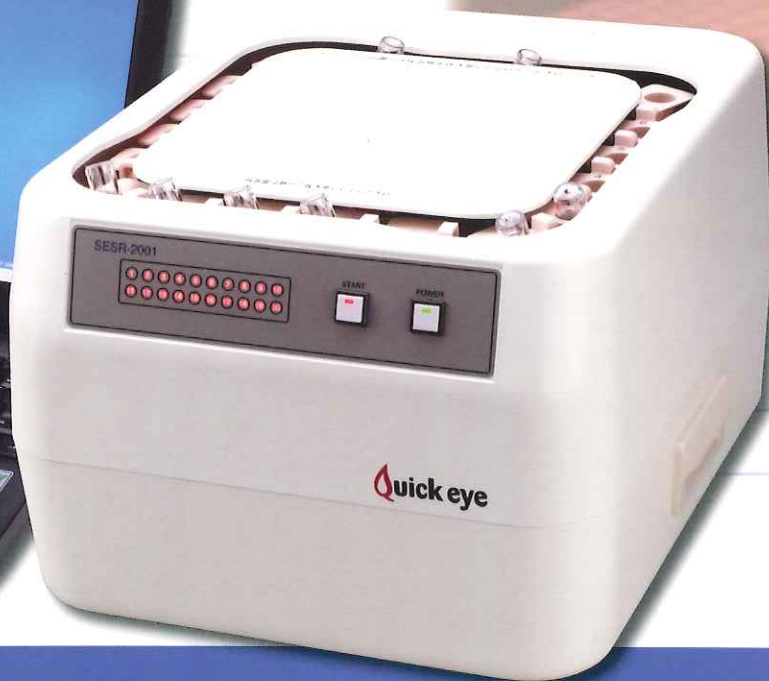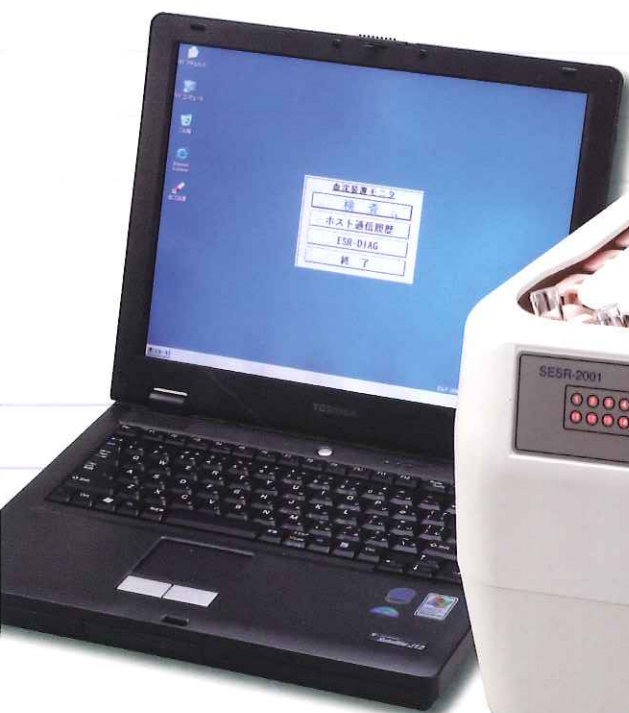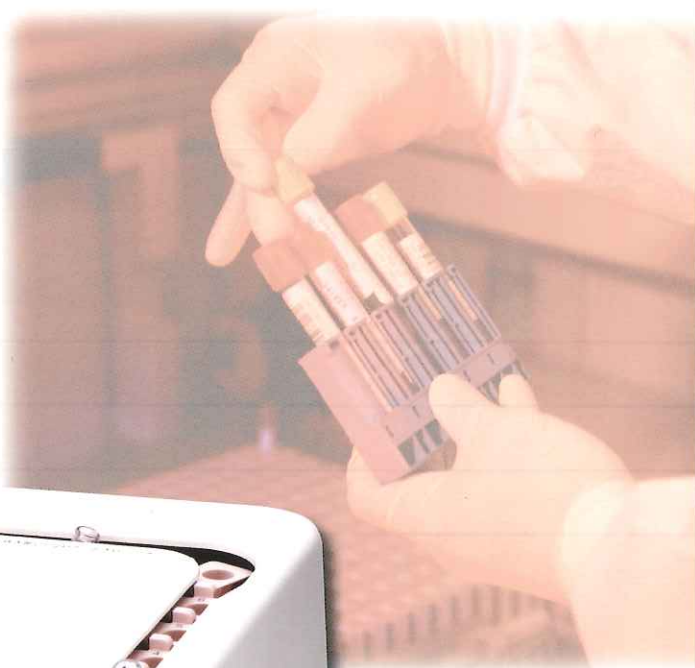


- 沈降カーブのグラフ機能を搭載
- バーコードリーダーを内蔵
- 測定が迅速タイプ。1時間値:20分 / 2時間値:40分
- ランダムアクセスにてリアルタイム測定が可能
- オートバーコードラベラー対応の専用血沈採血管 (採血量1.12mL)
- 最大60検体まで連結が可能 (オプション)
- 感染症対策への考慮 (他容器への血液分注不要)
- 上位システムとのオンラインが可能 (オプション)

相関図

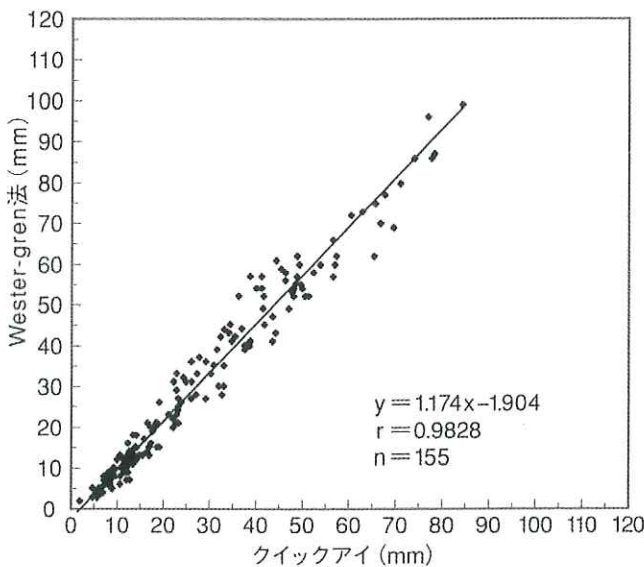

沈降カーブによるパターン

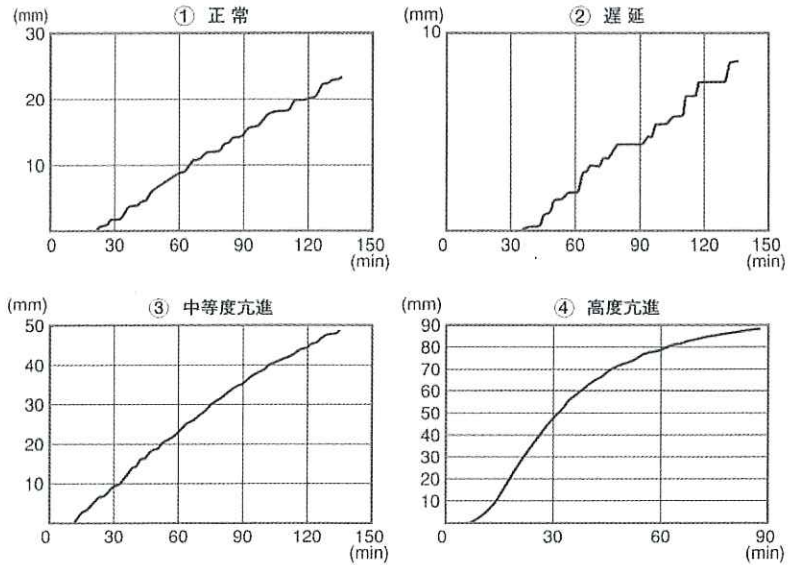

ディスポーザブル血沈採血管 Quick eye パートナー




仕様 赤血球沈降速度測定装置 クイックアイ SESR-2001

測定検体数	20検体ランダムスタート同時測定(最大60本/時間:オプション)
測定時間	10分(30分値) 20分(1時間値) 40分(2時間値)
測定値表示	赤血球沈降速度値 30分値・1時間値・2時間値 (必要により、中間値参照可)
真空採血管	専用採血管(微量血対応可能) 1.12mL
測定方式	CCD画像処理方法
温度補正	基準温度(18°C)への自動補正(マンレー曲線に基づく)
データ保存	最大100検体分保存(瞬時対応可:オプション)
プリンター	サーマルプリンター外付け(標準装備) 沈降カーブ出力プリンター(オプション)
表示部	液晶表示器
バーコードリーダ	レーザー式小型バーコードリーダ標準装備(最大12桁)
コンピュータ接続	RS-232Cインターフェース標準装備(専用フォーマット)
自己チェック機能	検体量レベルチェック/バーコードラベルの読取異常チェック/ 測定異常チェック/温度エラーチェック/メカニカルエラーチェック
電源	AC100V±10%
消費電力	150VA
重量(本体)	12kg
寸法	390(W)×450(D)×280(H)mm


※この他に40本タイプ・60本タイプがあります。(別途仕様打合せ)
 ※外觀・仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
 ⚠ご使用前に必ず「取り扱い説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

測定原理

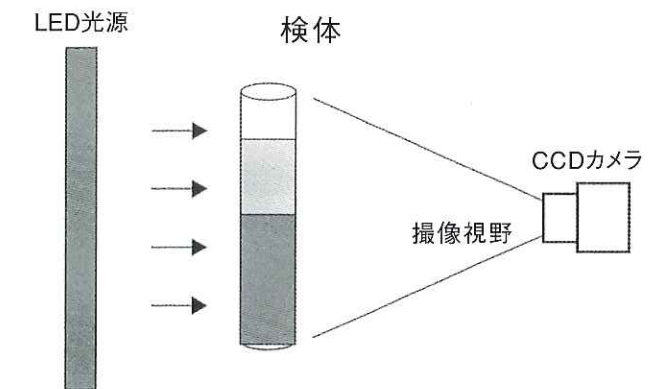

撮像視野モニター画面
(自己診断測定画面にて)

●各測定枠の範囲中で設定レベルにある画素数の最も多い位置を分離判定する。

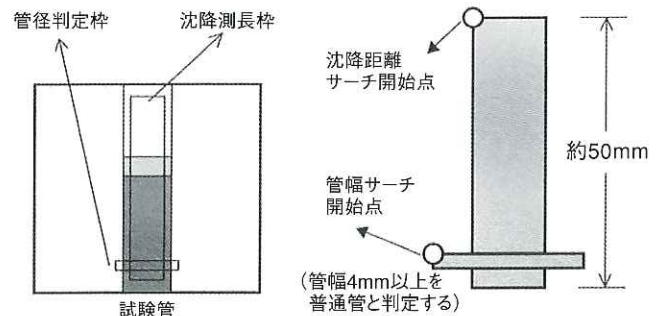

一般的名称: 赤血球沈降速度測定装置
 一般医療機器
 特定保守管理医療機器
 分類コード: 35488000

販売業者 **IMC 株式会社テクノメディカ** 本社 〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-5-1 TEL(045)948-1961 FAX(045)948-1962
 URL <http://www.TechnoMedica.co.jp> E-mail info@TechnoMedica.co.jp

名古屋支店 〒464-0850 名古屋市千種区今池4-4-9 5F TEL(052)741-1516 FAX(052)741-1517
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 11F TEL(06)6393-3800 FAX(06)6393-3801
 福岡支店 〒812-0015 福岡市博多区山王1-11-35 4F TEL(092)483-7333 FAX(092)483-7334
 札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西7-2-5 4F TEL(011)271-3770 FAX(011)271-3760
 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-14-1 3F TEL(022)771-9333 FAX(022)771-9334
 北関東営業所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町2-44 5F TEL(048)650-8191 FAX(048)650-8192
 甲信越営業所 〒390-0872 松本市北深志3-9-6 2F TEL(0263)38-0016 FAX(0263)38-0017
 広島営業所 〒731-0122 広島市安佐南区中筋2-3-4 1F TEL(082)830-5103 FAX(082)830-5104
 松山営業所 〒790-0056 松山市土居町23-5 1F TEL(089)945-3870 FAX(089)945-3871

製造販売業者 **株式会社セファメディックス**
 〒613-0031 京都府久世郡久御山町佐古外屋敷91-3 TEL(0774)43-9691 FAX(0774)43-9739

本カタログは、2012年5月現在のものです。