

ESR-1000



こんなに簡単に血沈ができれば.....
ESR-1000は、血沈管を立てるだけで
あなたにお応えします。


ESR-1000

自動赤血球沈降速度測定器

■操作はいっさいありません。

- ・血沈管をセットするだけで、自動的に測定記録します。
- ・セットは、1本ずつでも、まとめてでもいつでもOKです。
- ・測定終了ポジションに、いつでも新たに血沈管を立てられます。

■データと残り時間を、いつでも確認できます。

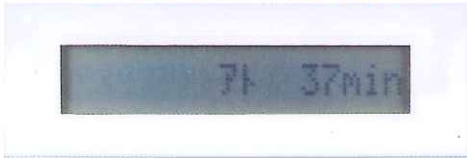

■万全の停電対策

- ・バッテリーでデータを保存しています。
- ・測定中電源が切れても、復帰後自動的に測定を続行します。
- ・この間に測定時間が過ぎてしまった場合は電源が切れる直前(最大1分前)と復帰直後の測定値を、その時刻と共に印字します。

- チャンネルNo.のキーを押すと、途中経過と測定終了までの時間を交互に表示します。必ずお役に立つ機能です。

一般的名称:赤血球沈降速度測定装置
 一般医療機器
 特定保守管理医療機器
 分類コード:35488000

ESR-1000の仕様

■検体測定能力

- ・使用血沈管 TMCディスポーザブル赤沈管
- ・測定検体数 10本まで同時セット可能
- ・測定時間 (選択可能) 1時間測定(30分値、1時間値)
2時間測定(30分値、1時間値、2時間値)
- ・測定範囲 0~150mm、0~100mm(試験管仕様時)
- ・測定誤差 ±0.5mm
- ・測定方式 透過型赤外フォトインターラプタによる並列スキャン方式

■表示

- ・表示方式 16桁液晶ディスプレイ
- ・印字方式 サーマルドット方式

■電源

AC100V(85-130V)50/60Hz

■消費電力

30(WA)

■寸法

325(W)×470(H)×175(D)

■重量

11.5kg

■機能

- ・血沈管の認識 フォトインターラプタによる自動認識。何時でもセット可能
アラーム音とLEDにて認識を確認。
- ・残り時間表示 測定終了までの時間表示
「アト○○○min」
- ・停電対策 測定は復帰後自動続行。
時間の過ぎたものは、停電前1分以内の血沈値と復帰直後の血沈値を印字。
- ・モード切換 測定時間 1時間測定/2時間測定
試験管 使用する/使用しない
測定値自動印字 する/しない
- ・アラーム アラーム音とエラー内容の印字
「ヨミトリエラー」
「ソクテイ ハンイ オーバー」
- コンピュータ接続 RS232C規格(オプション)

ウェスターグレン法(国際標準法)



TMCディスポーザブル赤沈管

- ・バネ付注射筒を使用し、ワンタッチで血液の注入ができます。
- ・樹脂製ストッパーにより、血液は自動的に「0」の位置で止まります。
- ・ストッパーが血液で膨脹するため、血液がこぼれません。
- ・ディスポタイプですから、感染も防げます。
- ・プラスチック製で割れないので、安全です。

ESR-6000BP



- ・同時に60本の血沈管が処理できます。
- ・バーコードリーダ/検体吸引ポンプ/自動温度補正機能の採用で、さらに進化した血沈自動測定の新基準。

製造販売業者/販売業者

TMC 株式会社テクノメディカ 本社 〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-5-1 TEL(045)948-1961 FAX(045)948-1962
 URL <http://www.TechnoMedica.co.jp> E-mail info@TechnoMedica.co.jp

名古屋支店 〒464-0850	名古屋市千種区今池4-4-9	TEL(052)741-1516	FAX(052)741-1517	仙台営業所 〒981-3133	仙台市泉区泉中央1-14-13F	TEL(022)771-9333	FAX(022)771-9334
大阪支店 〒564-0062	吹田市垂水町1-28-6-501	TEL(06)6337-3432	FAX(06)6337-3482	北関東営業所 〒330-0843	さいたま市大宮区吉敷町2-44	TEL(048)650-8191	FAX(048)650-8192
福岡支店 〒812-0015	福岡市博多区山王1-11-35	TEL(092)483-7333	FAX(092)483-7334	甲信営業所 〒390-0872	松本市北深志3-9-6 2F	TEL(0263)38-0016	FAX(0263)38-0017
札幌営業所 〒060-0063	札幌市中央区南3条西12丁目325-2-305	TEL(011)271-3770	FAX(011)271-3760	広島営業所 〒731-0122	広島市安佐南区中筋2-3-4-101	TEL(082)830-5103	FAX(082)830-5104
松山営業所 〒791-8055	松山市清住2丁目1100-6	TEL(089)911-6331	FAX(089)911-6332				