


卓上型採血管準備装置 BC・ROBO 6

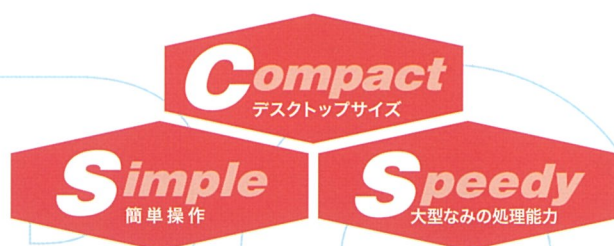

**採血管準備装置の新規格！
ダウンサイジングBC・ROBO登場！**

信頼と実績のBC・ROBOシリーズから
使いやすさに特化したBC・ROBO 6 登場！！

一日の採血患者数が数十名規模の 健診施設、クリニックなどに最適です。

卓上型採血管準備装置

BC・ROBO 6

コンパクト

設置場所を選ばない
460(W)×540(D)×530(H)mmの
デスクトップタイプ。

シンプル

採血管のセットはシンプルな
『投げ込み式』を採用。
(方向検知機能搭載)

スピーディー

大型採血管準備装置に匹敵する
5秒/本の処理能力。



- 6管種対応の卓上型採血管準備装置。
- 供給部は40本入れて、採血管を横向きに左右関係なく装填可能。
- 動作中でも採血管の補充が可能。
- 外観はコンパクトなのに手貼りプリンタ内蔵の一体型。
- 採血管トレイはオールインワン(採血管、採血指示書、手貼りラベル等)。
- 標準で健診向けに連続発行も可能です。

仕様一覧

項目	仕様
適用採血管	径:φ12~φ16.5mm 長さ:75~105mm ゴム栓、フィルム栓、プラスチック栓、栓無し分注管、スピッツ管
採血管搭載能力	6管種
採血管収容本数	最大40本/1管種
処理能力	連続発行時5秒/1本
印字方式	ダイレクトサーマル
印字の種類	バーコード:code128,code39,JAN,ITF,NW-7(codabar) 文 字:英数字、カナ、ひらがな、記号、漢字
ラベル	30×50、35×50、30×60mm ※装置の安定稼働のため純正ラベルをご使用下さい
ラベル貼付け位置	各採血管ごとに任意に設定可能
トレイ排出	1オーダー分(発行済採血管および手貼りラベル)を BC・ROBO専用トレイに排出 排出口は装置正面 トレイのセットは手動
採血管の入れ間違い対策	供給部個別にダミーの採血管を架設する
採血管の方向検知機能	あり
接続インターフェース	TCP/IP
入力電源	AC100V~240V、400W
外形寸法(mm)	460(W)×540(D)×530(H) (モニター部除く)
重量	65kg


● 外観、仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。



採血管セットは安心、簡単な『投げ込み式』を採用。1種類40本×6種類まで可。



ディスプレイは操作性に優れた大型ディスプレイ採用。

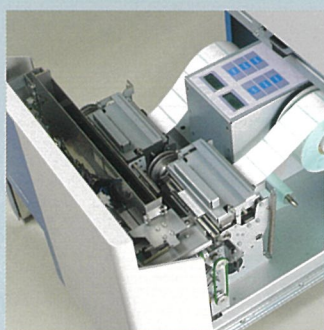

供給部全体のメンテナンス、手貼りプリンタの交換も全面操作で簡単。



トレイ排出部は採血管トレイの有無をランプで表示。



安全に関するご注意

● ご使用の前に必ず「取り扱い説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

● 熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる場合があります。異常を感じた場合はすぐに操作を停止し、お買い上げの代理店、販売店、または弊社までご連絡ください。

本カタログは、2016年10月現在のものです。

TMC 株式会社テクノメディカ 本社 〒224-0041 横浜市中区都筑区仲町台5-5-1 TEL(045)948-1961 FAX(045)948-1962
URL: <http://www.TechnoMedica.co.jp> E-mail: info@TechnoMedica.co.jp

名古屋支店 〒464-0850 名古屋市中千種区今池5-4-3 6F TEL(052)741-1516 FAX(052)741-1517
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 11F TEL(06)6393-3800 FAX(06)6393-3801
福岡支店 〒812-0015 福岡市博多区山王1-11-35 4F TEL(092)483-7333 FAX(092)483-7334
札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西7-2-5 4F TEL(011)271-3770 FAX(011)271-3760
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-14-1 3F TEL(022)771-9333 FAX(022)771-9334

北関東営業所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町2-44 5F TEL(048)650-8191 FAX(048)650-8192
甲信越営業所 〒390-0872 松本市北深志3-9-6 2F TEL(0263)38-0016 FAX(0263)38-0017
広島営業所 〒730-0802 広島市中区本川町2-6-5 6F TEL(082)961-3670 FAX(082)961-3671
松山営業所 〒790-0056 松山市土居町23-5 1F TEL(089)945-3870 FAX(089)945-3871