

尿スピッツラベラー
UA・LABELER-2 **RFID**



RFID 対応で次世代検体管理を実現！


バーコードとRFID、両方の読み取り・貼り付けに対応！
さらに簡単＆迅速・確実な尿検体の前処理が可能になりました。

スピッツ管へのバーコードのラベリングはもちろん、**RFID**にも対応。(オプション)

バーコード
貼り付け



RFID
貼り付け

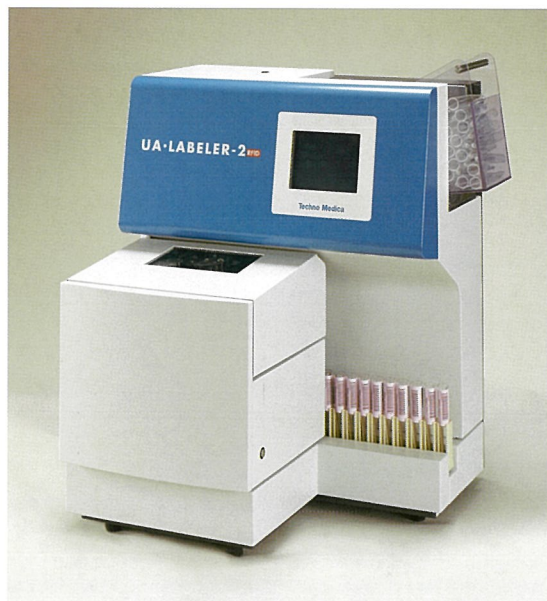


バーコード読み取り
ラベルの貼り付けは、
バーコード・リーダに
ハルンカップのバーコードを
読み取らせるだけでOK。




RFID読み取り
アンテナボックス
(読取装置)に
RFID タグ付ハルンカップを
置くだけの簡単操作。


●RFIDアンテナボックスはオプションです。

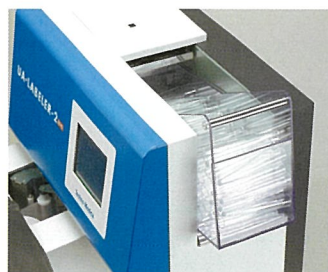

スピッツ管の供給(最大120本)は
向きを揃えることなく投入するだけ。

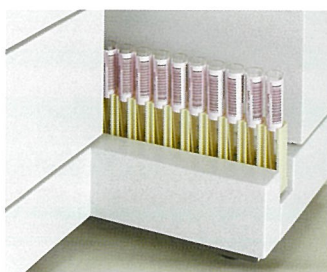

ラベリング済みのスピッツ管は10本
立てラックに自動的に収納。

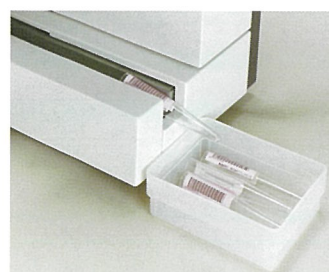

5秒/本の高速処理でトレイに1本
ずつ収納することも可能。

【UA・LABELER-2 **RFID**】仕様一覧

項目	仕様
処理能力	5秒/本(連続発行時)
適用スピッツ管	管径:φ16~17.5mm 管長:100~107.5mm(又は当社推奨品)
スピッツ管供給数	120本
ラベルプリンタ部	ダイレクトサーマル RFID書き込み オプション対応
印字種類	バーコード:code128、code39、JAN、2of5、NW-7 文字:英文字、数字、ひらがな、カタカナ、記号、漢字
ラベルサイズ	50x30mm 50x35mm 但し、RFIDラベルは50x30のみ
インターフェース	TCP/IP・RS-232C
外形寸法	565(W) x 610(H) x 465(D)mm
重量	55kg
電源電圧	AC100V、50/60Hz
消費電力	最大300VA

●外観、仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。



安全に関するご注意

●ご使用前に
必ず「取り扱い説明書」をよくお読みになり、
正しく安全にお使いください。

●熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、
時には安全性を損なって事故につながる場合があります。異常を感じた場合はすぐに操作を停止し、
お買い上げの代理店、販売店、または弊社までご連絡ください。

本カタログは、2014年9月現在のものです。



株式会社テクノメディカ

本社 〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-5-1 TEL(045)948-1961 FAX(045)948-1962
URL <http://www.TechnoMedica.co.jp> E-mail info@TechnoMedica.co.jp

名古屋支店 〒464-0850 名古屋市中千種区今池5-4-3 6F TEL(052)741-1516 FAX(052)741-1517
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 11F TEL(06)6393-3800 FAX(06)6393-3801
福岡支店 〒812-0015 福岡市博多区山王1-11-35 4F TEL(092)483-7333 FAX(092)483-7334
札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西7-2-5 4F TEL(011)271-3770 FAX(011)271-3760
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-14-1 3F TEL(022)771-9333 FAX(022)771-9334

北関東営業所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町2-44 5F TEL(048)650-8191 FAX(048)650-8192
甲信越営業所 〒390-0872 松本市北深志3-9-6 2F TEL(0263)38-0016 FAX(0263)38-0017
広島営業所 〒731-0122 広島市安佐南区中筋2-3-4 1F TEL(082)830-5103 FAX(082)830-5104
松山営業所 〒790-0056 松山市土居田町23-5 1F TEL(089)945-3870 FAX(089)945-3871